



Mounjaro® KwikPen® – Uygulamaya ve diğer önemli bilgilere genel bakış

1. Hazırlık

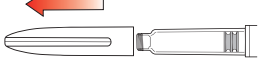


- Kalemin koruyucu kapağını düz bir şekilde çekip çıkarın
- Kalemi, dozu ve son kullanma tarihini kontrol edin

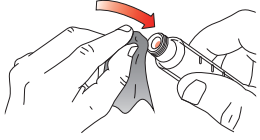


- Kırmızı iç contayı alkolü bir bezle silin




- Yeni kalem iğnesi kullanın
- Koruyucu kağıdı çıkarın

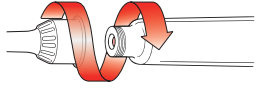

- Koruyucu kapaklı iğneyi **dikey olarak kalemin üzerine bastırın**
- İğneyi **sabitlenene** kadar çevirin
- İğnenin dışındaki koruyucu kapağı çekip çıkarın ve saklayın.** Buna daha sonra yeniden ihtiyacınız olacak
- İğnenin iç kısmındaki koruyucu kapağı **çekip çıkarın ve atın**

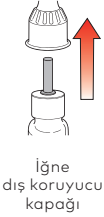

İğne dış koruyucu kapağı

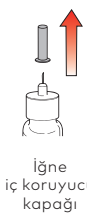


İğne iç koruyucu kapağı


2. Hava boşaltma



- 2 tıklama** sesi duyana kadar doz ayar düğmesini çevirin
- Daha uzun olan çizgi görülebilir olmalı. Bu, **hava boşaltma pozisyonudur**
- Hava boşaltma pozisyonunun düzeltilmesi: Doz ayar düğmesi **her iki yöne de** çevrilebilir

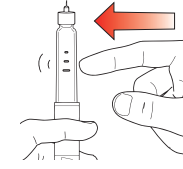


- Kalemi iğne yukarı bakacak şekilde tutun
- Hava kabarcıklarının uç kısımda toplanmasını sağlamak için kartuş tutucuya hafifçe vurun
- Doz ayar düğmesine **sonuna kadar bastırarak** bir miktar ilacı dışarı çıkarın
- Doz ayar düğmesini basılı tutun ve **5'e kadar sayın**
- Doz ekranında **0** görünmelidir. Vücuda enjekte etmeyin

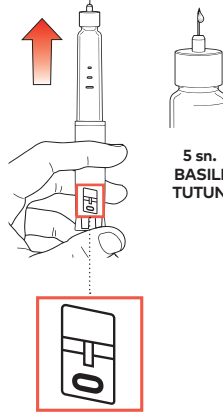


5 sn. BASILI TUTUN

- Havanın boşaltılması** havanın kartuştan çıkarılmasını sağlar
- İğne ucundan **az miktarda** ilaç **çıktığında** kalemin havası boşalmış demektir
- Lütfen dikkat edin:** Her kalem için maks. **8 hava boşaltma işlemi!** Aşırı hava boşaltma kalemin 4. (son) enjeksiyondan önce **tıkanmasına** neden olabilir
- İlaç görünmüyor:** Adımı tekrarlayın (en fazla iki kez)
- İlaç hâlâ görünmüyor:** Kalemin iğnesini değiştirin ve adımı tekrarlayın (en fazla bir kez)
- İlaç hâlâ görünmüyor:** Lilly ofisiyle iletişime geçin (prospektüste belirtilmiştir)


3. Enjekte etme

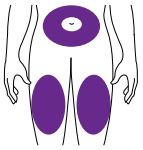

- Uyluk veya karın
- Göbek deliğinden en az **5 santimetre** uzak olmalıdır
- Enjeksiyon bölgesini **her hafta** değiştirin

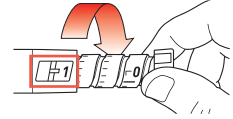


- Doz ayar düğmesini durana ve doz ekranında **1** görünene kadar çevirin
- 1** bir **tam** doza karşılık gelir

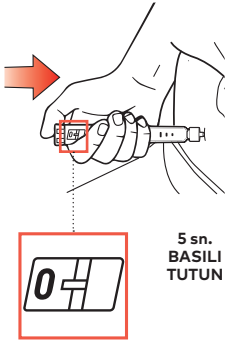


5 sn. BASILI TUTUN


- İğneyi deriye batırın
- Doz ayar düğmesini **sonuna kadar** bastırın (ilacı enjekte edin)
- Doz ayar düğmesini **basılı tutun** ve **yavaşça 5'e kadar sayın**
- Doz ekranında **0** görülebilir olduğunda doz **tamamen enjekte edilmiş** demektir
- İğneyi deriden çıkarın.** İğne ucunda bir damla kadar ilaç olması normaldir. Bu damla, dozu **etkilemez**
- Doz ekranında **0** **görülüyorsa** doz tamamen alınmıştır
- Doz ekranında **0** **görülmiyorsa** iğneyi yeniden deriye batırın ve enjeksiyonu tamamlayın
- Doz ayarını **DEĞİŞTİRMİYİN**
- Dozu **tam olarak alamadığınızı** düşünüyorsanız – yeniden enjeksiyon **UYGULAMAYIN**
- Lilly ofisiyle iletişime geçin (bkz. prospektüs)

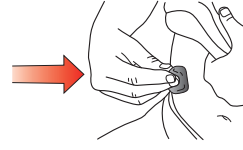

- Kan çıkarsa bir bezle enjeksiyon bölgesine hafifçe bastırın – **OVALAMAYIN**

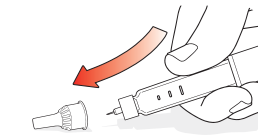

- İğnenin dış** kapağını dikkatlice yerleştirin

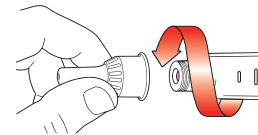

- İğneyi **İğnenin dışına yerleştirilen koruyucu kapakla** çıkarın
- Kalemi **HİÇBİR ZAMAN** iğne takılı halde saklamayın, şunun için:
 - Sızıntıyı,
 - Tıkanmayı,
 - Kaleme hava girmesini önlemek için



- Koruyucu kapağı yerleştirin
- Kalemi **HİÇBİR ZAMAN** koruyucu kapağı takmadan saklamayın

Önemli not: Mounjaro®'yu Mounjaro® KwikPen® ile enjekte etmek için iğne gerekir. İğne önerisini ve reçeteyi tedavi eden doktordan alırsınız.

Şırınga ne zaman uygulanmalı?

- Mounjaro®'yu daima haftanın aynı günü uygulayın. İpucu: Uygulama günü için telefonunuza veya takviminize hatırlatıcı ekleyin
- İki doz arasında en az 3 gün olduğu takdirde haftalık uygulama gününüzü değiştirebilirsiniz

Bir dozu atladınız mı?

- Atladığınız dozdan sonraki 4 gün içerisinde olmak üzere mümkün olan en kısa sürede unutulmuş dozu alın
- 4 günden fazla zaman geçmişse:
 - unutulmuş dozu atlayın
 - bir sonraki dozu planlanan normal gününde alın
 - düzenli olarak haftada 1 doza devam edin

İlk kullanımdan önce saklama

- İlk kullanımdan önce kalem buzdolabında 2 °C ila 8 °C'de saklayın
- Henüz kullanılmamış kalemler son kullanma tarihine kadar kullanılabilir
- Kalem hiçbir zaman dondurmayın. Yanlışlıkla dondurulmuşsa kalem atın

İlk kullanımdan sonra saklama

- Daha önce kullanılmış kalem 30 °C'nin altında oda sıcaklığında saklanabilir
- Kalem içinde hala ilaç olsa dahi ilk kullanımdan 30 gün sonra bertaraf edin
- Dördüncü haftalık dozu aldıktan sonra kalem bertaraf edin

4. enjeksiyondan sonra Mounjaro® KwikPen® içinde kalan miktar

- 4. dozdan sonra ilaç kalır
- Kalan ilaç tam doz olarak sayılmaz ve enjekte edilmemelidir
- Kalem kalan ilaçla birlikte 4. (son) dozdan sonra atılmalıdır



Kalan miktar

Bertaraf etme

- Kullanılmış kalem iğneleri: delinmez atık kabı
- Mounjaro® KwikPen®: doktorun talimatlarına göre

Önemli: Mounjaro® KwikPen® ile birlikte verilen kullanma talimatlarını mutlaka okuyun ve bunlara uyun.

Daha fazla bilgi edinin:

Tedavi ekipleri irtibata geçeceğiniz ilk kişilerdir

Daha fazla bilgiyi Mounjaro® KwikPen® ile birlikte verilen **kullanım talimatlarında** bulabilirsiniz veya QR kodu taratabilirsiniz



Kullanım talimatlarına git

www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro adresine gidin veya QR kodu taratın



Web sitesine git

QR kodu tarattığınızda Mounjaro® KwikPen® kullanımıyla ilgili detaylı **kılavuza** ulaşabilirsiniz



Uygulama videosuna git