



Mounjaro® KwikPen® — stosowanie i inne ważne informacje w skrócie

1. Przygotowanie

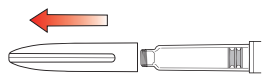


- Zsunąć osłonkę wstrzykiwacza w linii prostej
- Skontrolować wstrzykiwacz, moc dawki oraz datę ważności

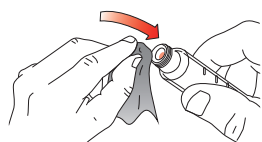


- Wytrzeć uszczelnienie wewnętrzne wacikiem nasączonym w alkoholu




- Użyć nowej igły do wstrzykiwacza
- Zdjąć papier ochronny

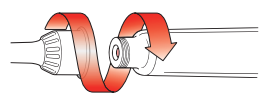

- Nasadzić igłę z osłonką ochronną pionowo na wstrzykiwacz
- Kręcić igłą aż do jej **solidnego zamocowania**

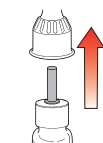

Zewnętrzna osłona ochronna igły

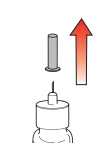


Wewnętrzna osłona ochronna igły

- **Zdjąć zewnętrzną osłonę ochronną igły i odłożyć ją do późniejszego wykorzystania.** Jest ona przeznaczona do wielokrotnego użytku
- **Zdjąć i zutylizować** wewnętrzną osłonę ochronną igły


2. Odpowietrzanie



- Kręcić przyciskiem dozującym aż do usłyszenia **2 kliknięć**
- Musi być widoczna wydłużona linia. Jest to **pozycja odpowietrzania**
- Korekta pozycji odpowietrzania: przyciskiem dozującym można kręcić **w obu kierunkach**

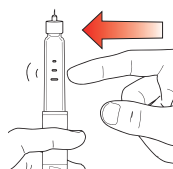

- Trzymać wstrzykiwacz igłą do góry
- Delikatnie postukać palcem uchwytu wkładu, aż na końcu zgromadzą się pęcherzyki powietrza
- Przycisk dozujący **docisnąć do oporu**, aby wypuścić niewielką ilość produktu leczniczego w powietrze
- Trzymając wciśnięty przycisk dozujący, **odliczyć do 5**
- Cyfra **0** musi być widoczna w okienku dozowania. Nie wstrzykiwać do ciała

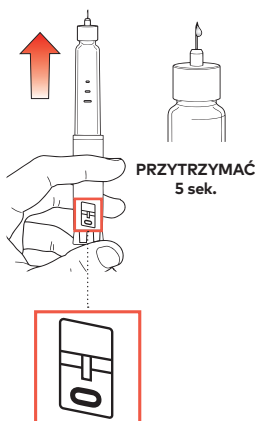


- **Odpowietrzyc**, upewniając się, że powietrze zostało usunięte z wkładu
- Wstrzykiwacz został odpowietrzony, jeśli **niewielka ilość** produktu leczniczego **wydstaje się** z igły wstrzykiwacza


• Uwaga:

- Maksymalnie **8 odpowietrzeń na wstrzykiwacz!** Nadmierne odpowietrzanie może spowodować **zablokowanie wstrzykiwacza** przed 4. (ostatnim) wstrzyknięciem
- **Nie widać produktu leczniczego:** powtórzyć krok (nie więcej niż dwa kolejne razy)
- **Wciąż nie widać produktu leczniczego:** wymienić igłę wstrzykiwacza i powtórzyć krok (nie więcej niż raz)
- **Wciąż nie widać produktu leczniczego:** skontaktować się z oddziałem Lilly (zob. ulotkę dołączoną do opakowania)


3. Wykonać wstrzyknięcie

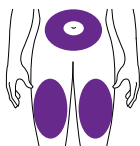

- Udo lub brzuch
- W odległości co najmniej **5 cm** od pępka
- **Co tydzień** zmieniać miejsce wstrzyknięcia

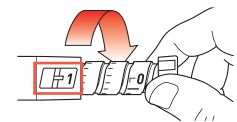


- Kręcić przyciskiem dozującym, aż się zatrzyma, a w okienku dozowania pokaże się cyfra **1**
- Cyfra **1** odpowiada **pełnej dawce**

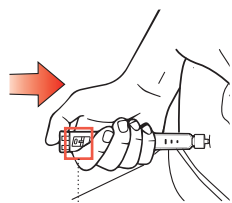


PRZYTRZYMAĆ
5 sek.


- Wkłuć igłę w skórę
- Docisnąć przycisk dozujący **do oporu** (wstrzyknąć produkt leczniczy)
- **Trzymając wciśnięty** przycisk dozujący, **odliczyć powoli do 5**
- Kiedy w okienku dozującym widać cyfrę **0**, to dawka została **wstrzyknięta w całości**
- **Wyjąć igłę ze skóry.** Jedna kropla produktu leczniczego na końcu igły to normalne zjawisko. **Nie wpływa** ona na dawkę
- Jeśli w okienku dozowania **widać** cyfrę **0**, to dawka została przyjęta w całości
- Jeśli w okienku dozowania **nie widać** cyfry **0**, ponownie wkłuć igłę w skórę i zakończyć wstrzyknięcie.
- **NIE zmieniać** ustawienia dawki
- Jeśli wciąż istnieje obawa, że dawka **nie została przyjęta w całości** – **NIE** wykonywać ponownego wstrzyknięcia
 - Skontaktować się z oddziałem Lilly (zob. ulotkę dołączoną do opakowania).

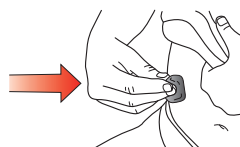


- Jeśli jest widoczna krew, lekko ucisnąć miejsce wstrzyknięcia wacikiem – **NIE pocierać**

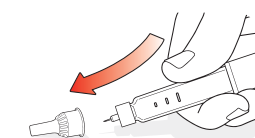

- **Ostrożnie** nałożyć zewnętrzną osłonę ochronną igły

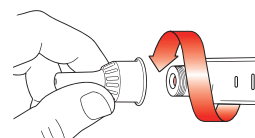

- Odkręcić igłę z **nałożoną zewnętrzną osłoną ochronną igły**
- **NIGDY** nie przechowywać wstrzykiwacza z założoną igłą, aby zapobiec:
 - wyciekowi,
 - zablokowaniu,
 - wnikięciu powietrza do wstrzykiwacza

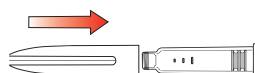

- Nałożyć osłonę ochronną
- **NIGDY** nie przechowywać wstrzykiwacza bez nałożonej osłony ochronnej

Ważna wskazówka: Do wstrzyknięcia Mounjaro® za pomocą Mounjaro® KwikPen® potrzebne są igły. Zalecenie dotyczące igły oraz odpowiednią receptę wystawia lekarz prowadzący.

Kiedy wstrzykiwać?

- Mounjaro® należy przyjmować zawsze tego samego dnia tygodnia. Wskazówka: ustawić przypomnienie na dany dzień w telefonie lub kalendarzu
- Można zmienić dzień cotygodniowego przyjmowania leku, o ile przerwa między dwiema dawkami wynosi co najmniej 3 dni

Pominięta dawka?

- Jak najszybciej uzupełnić pominiętą dawkę w ciągu 4 dni
- Jeśli minęły więcej niż 4 dni:
 - nie podawać pominiętej dawki
 - podać następną jak zwykle w ustalonym dniu
 - można kontynuować regularne podawanie preparatu 1× w tygodniu

Przechowywanie przed napoczęciem

- Przed pierwszym użyciem należy przechowywać wstrzykiwacz w lodówce w temperaturze od 2 do 8°C
- Nienapoczęte wstrzykiwacze mogą być użyte przed upływem daty przydatności
- Nie wolno zamrażać wstrzykiwacza. Zutyliзовать wstrzykiwacz, który został zamrożony przez pomyłkę

Przechowywanie po napoczęciu

- Przechowywać napoczęty wstrzykiwacz w temperaturze pokojowej poniżej 30°C
- Zutyliзовать wstrzykiwacz 30 dni po pierwszym użyciu, także jeśli wciąż znajduje się w nim produkt leczniczy
- Zutyliзовать wstrzykiwacz po podaniu czwartej dawki tygodniowej

Resztka produktu leczniczego w Mounjaro® KwikPen® po 4. wstrzyknięciu

- Po 4. wstrzyknięciu we wstrzykiwaczu pozostaje resztka produktu leczniczego
- Resztka produktu leczniczego nie stanowi pełnej dawki i nie należy jej wstrzykiwać
- Wstrzykiwacz musi być zutyliзовать wraz z resztką produktu leczniczego po 4. (ostatniej) dawce



Resztka produktu

Utylizacja

- Zużyte igły wstrzykiwacza: pojemnik odporny na przekłucie
- Mounjaro® KwikPen®: zgodnie z zaleceniami lekarza

Ważne: Należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania dołączoną do Mounjaro® KwikPen® i postępować zgodnie z nią.

Dodatkowe informacje:

Pierwsze osoby do kontaktu to personel medyczny

Dodatkowe informacje można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania dołączonej do Mounjaro® KwikPen® albo przez zeskanowanie kodu QR



Informacje dla użytkownika z ulotki dołączonej do opakowania

Wejdź na stronę www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro lub zeskanuj kod QR



Witryna internetowa

Poniższy kod QR prowadzi do szczegółowej instrukcji użycia Mounjaro® KwikPen®



Film instruktażowy